


Toma de Muestra de Saliva e Instrucciones de Envío

Por favor NO coma, beba, fume o mastique chicle o goma de mascar 30 minutos antes de tomar su muestra de saliva. Por favor NO remueva el plástico de la tapa del embudo.

Para mejorar la producción de saliva frote sus mejillas o frote su lengua en la parte superior de la boca (paladar). Imagine un dulce, limón o comida favorita en su boca. También puede poner una pequeña cantidad de azúcar en la lengua. No trague inmediatamente el azúcar, deje que se disuelva por completo.



Contenido de kit de toma de muestra de saliva

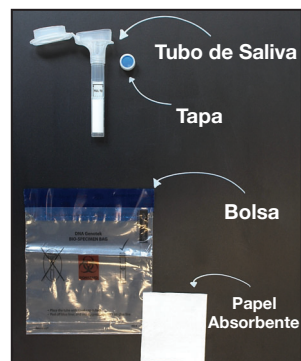


Esto es lo que encontrará en su kit de toma de muestra de saliva.

Toma de muestra de saliva e instrucciones de envío



1. Escupa una pequeña cantidad de saliva (no burbujas) hasta que llegue al tope de la línea sólida.

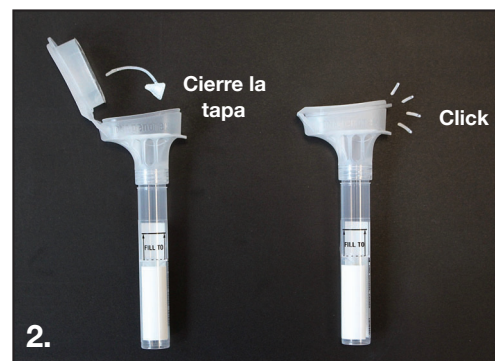


2. El embudo contiene líquido estabilizante. Para cerrar la tapa del embudo, presione fuertemente hasta que escuche un click fuerte.



3. Remueva la tapa azul del kit y manténgala a su lado. Sostenga el tubo verticalmente y desenrosque el embudo del tubo. Deshágase del embudo.




4. Use la tapa azul para cerrar completamente el tubo.

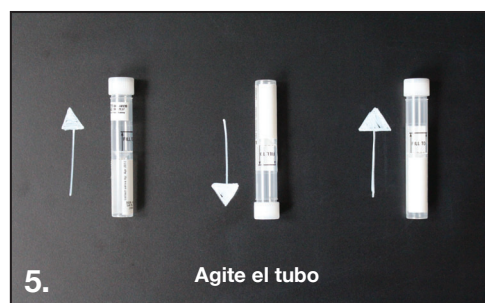

5. Agite el tubo con la tapa por 5 segundos.



6. Abra la bolsa ("specimen bag") y ponga el tubo ya cerrado en la bolsa. NO remueva el papel absorbente. Selle la bolsa.

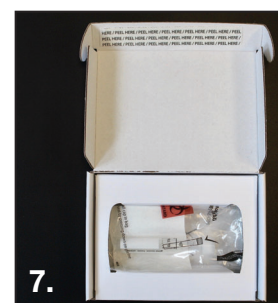

7. Ponga la bolsa con su muestra de saliva dentro de la caja.



8. Cierre la caja y séllela.



9. La caja viene con los gastos de envío prepagados. Envíenos la caja con su muestra llevándola a su oficina de correo o buzón postal preferida.