



Saliva collection and mailing instructions

Do NOT eat, drink, smoke or chew gum for 30 minutes before giving your saliva sample.
Do NOT remove the plastic film from the funnel lid.

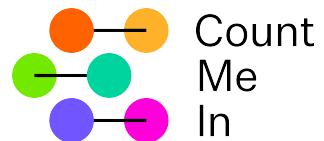


To improve saliva generation: rub the cheeks or rub your tongue on the roof of the mouth. Imagine candy, lemon or favorite food in your mouth. Alternatively you can place a small amount of sugar on the tongue and allow the sugar to dissolve.

Saliva kit contents

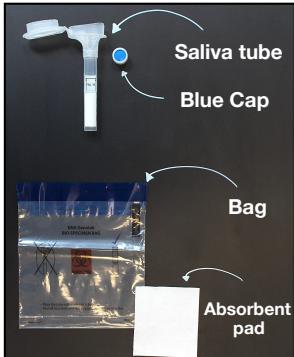


This is what you can expect to receive in your kit.

Saliva collection and mailing instructions

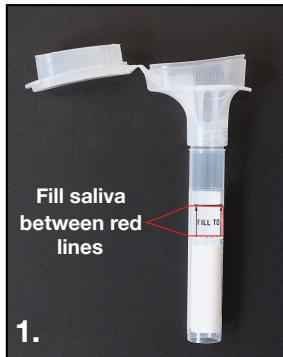

1.

Spit a small amount of saliva (not bubbles) until it reaches the solid line.

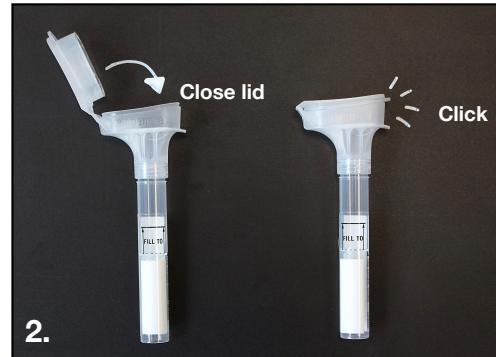

2.

Funnel lid contains stabilizer liquid. Close the lid tightly by pushing down hard on the funnel lid until you hear a loud click.




3.

Remove the blue cap from kit and place on the side. Hold the tube upright. Unscrew the funnel from the tube.



4.

Use the small blue cap to close the tube tightly.

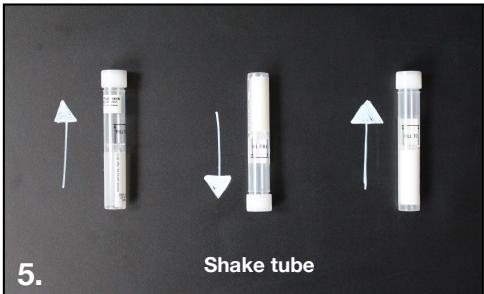

5. Shake tube

Shake the capped tube for 5 seconds. Discard the funnel.



6.

Seal the capped tube into the bag provided. Do NOT remove absorbent pad.



7.

Place bag with sample into the box.



8.

Close box and seal shut.




9.

Mail from nearest postal location. This box already contains a prepaid shipping label.


Toma de Muestra de Saliva e Instrucciones de Envío

Por favor NO coma, beba, fume o mastique chicle o goma de mascar 30 minutos antes de tomar su muestra de saliva. Por favor NO remueva el plástico de la tapa del embudo.

Para mejorar la producción de saliva frote sus mejillas o frote su lengua en la parte superior de la boca (paladar). Imagine un dulce, limón o comida favorita en su boca. También puede poner una pequeña cantidad de azúcar en la lengua. No trague inmediatamente el azúcar, deje que se disuelva por completo.

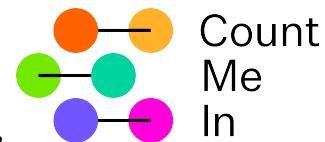

Contenido de kit de toma de muestra de saliva

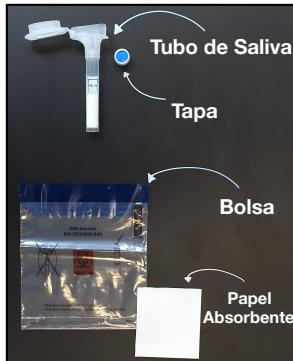


Esto es lo que encontrará en su kit de toma de muestra de saliva.

Toma de muestra de saliva e instrucciones de envío

- 

1. Llene con saliva entre las líneas rojas

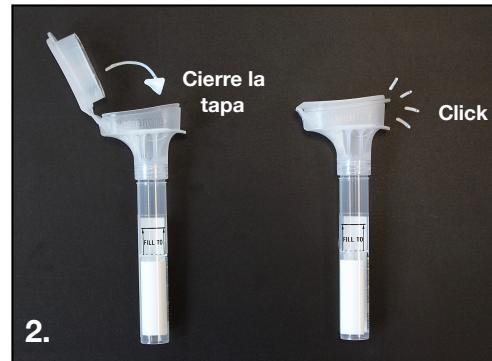Escupe una pequeña cantidad de saliva (no burbujas) hasta que llegue al tope de la línea sólida.
- 


2. Cierre la tapa

El embudo contiene líquido estabilizante. Para cerrar la tapa del embudo, presione fuertemente hasta que escuche un click fuerte.
- 

3. Desenrosque el embudo del tubo

Remueva la tapa azul del kit y manténgala a su lado. Sostenga el tubo verticalmente y desenrosque el embudo del tubo. Deshágase del embudo.
- 

4. Cierre el tubo con la tapa

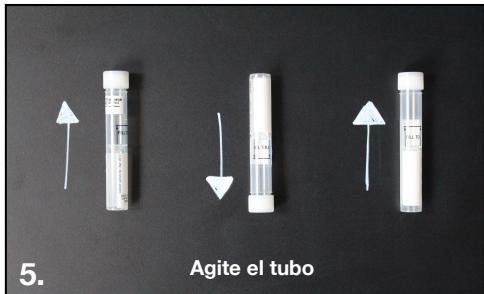Use la tapa azul para cerrar completamente el tubo.
- 

5. Agite el tubo

Agite el tubo con la tapa por 5 segundos.
- 


6. Despegue

Abra la bolsa ("specimen bag") y ponga el tubo ya cerrado en la bolsa. NO remueva el papel absorbente. Selle la bolsa.
- 

7.

Ponga la bolsa con su muestra de saliva dentro de la caja.
- 

8. Despegue

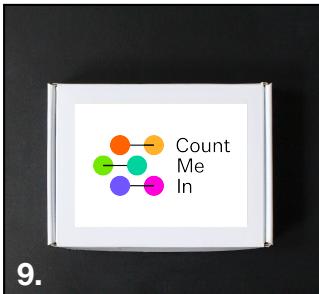Cierre la caja y séllela.
- 

9.

La caja viene con los gastos de envío prepagados. Envíenos la caja con su muestra llevándola a su oficina de correo o buzón postal preferida.