

TestBoston

617-525-4220

www.TestBoston.org

تنبيه مهم: يجب إرسال عينتك يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، ويجب إرسالها في اليوم نفسه الذي أجريت فيه الاختبار. لا تأخذ عينتك قبل أن تؤكد وقت النقل النهائي لصندوق الإيداع الخاص بشركة UPS أو تحدد موعدًا لالتقاطها من المنزل.




التوجيهات الخاصة بمجموعة أدوات مسحة الأنف

تنبيه مهم:

يجب إرسال عينتك يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، ويجب إرسالها في اليوم نفسه الذي أجريت فيه الاختبار. لا تأخذ عينتك قبل أن تؤكد وقت النقل النهائي لصندوق الإيداع الخاص بشركة UPS أو تحدد موعدًا لالتقاطها من المنزل.




• قم بتأكيد طريقة الإرسال الخاصة بك مع UPS.

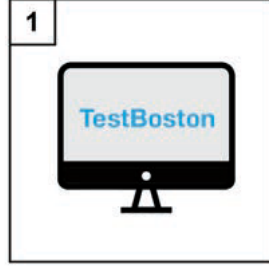


• قم بتسجيل الدخول إلى TestBoston.org للإجابة عن استقصاء الأعراض الخاص بك.




• أخرج مجموعة الأدوات وضع جميع المحتويات على سطح نظيف وجاف.

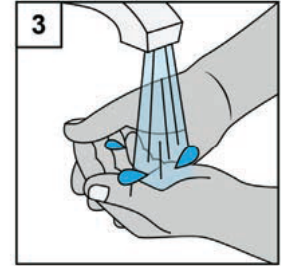

• اغسل يديك وجففهما.

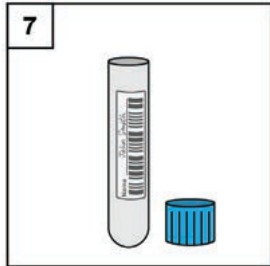


• اسحب الجزء العلوي من أنبوب الحفظ (ب).

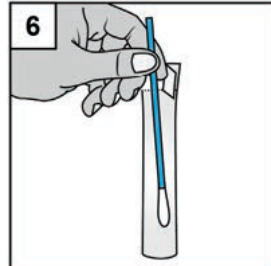


• أخرج المسحة (ج) من عبوتها.
• لا تلمس طرف المسحة.




• اكتب اسمك والتاريخ الذي تجمع فيه العينة على أحد الملصقات (أ)، وألصق الملصق على جانب أنبوب الحفظ (ب).

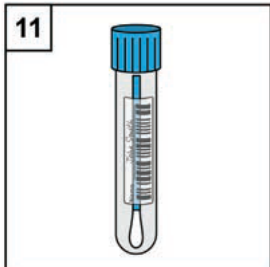


• اضغط على الجزء العلوي من أنبوب الحفظ.
• اغسل يديك وجففهما.

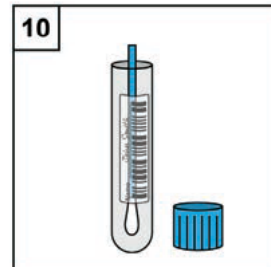

• ضع المسحة في أنبوب الحفظ بحيث يكون الطرف الناعم في قاع الأنبوب.

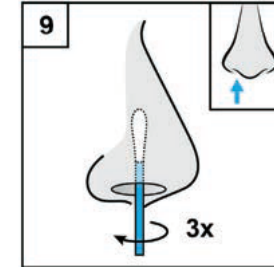

• انقل المسحة إلى فتحة الأنف الأخرى وكرر الخطوة 8.

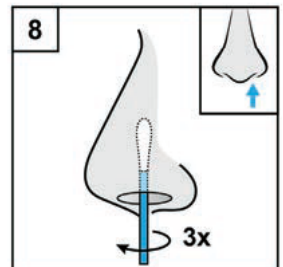


• حرك المسحة حركة دائرية حول الحافة الداخلية لفتحة أنفك بالكامل 3 مرات على الأقل وأبقها في مكانها لمدة 15 ثانية.


التوجيهات الخاصة بمجموعة بقعة الدم

• ستحتاج لعمل 5 بقع من الدم بحيث:


- تشبع ورقة الترشيح في منطقة البقعة بأكملها.
- تكون بحجم المثال (0,5 بوصة أو 12,7 مم).

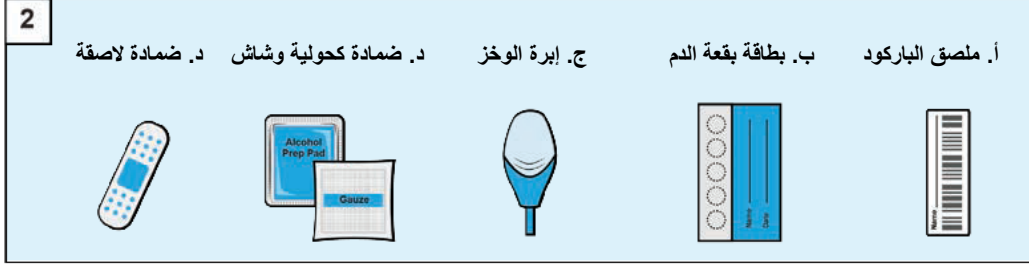


• أخرج مجموعة الأدوات وضع جميع المحتويات على سطح نظيف وجاف.

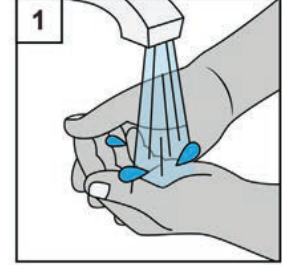


• اغسل يديك وجففهما.

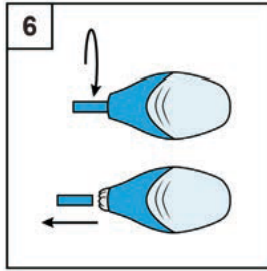


• حل الغطاء الواقي (ج) واسحب للخارج بشكل مستقيم.

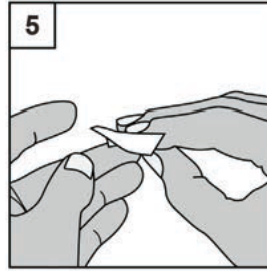


• افتح الضمادة الكحولية والشاش المعقم (د).
اختر بين إصبعك الأوسط أو البنصر من اليد التي لا تكتب بها.
• امسح إصبعك بالضمادة الكحولية واتركه حتى يجف.

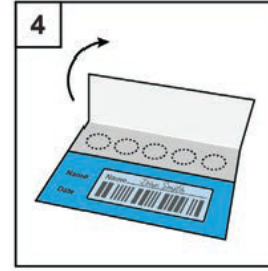


• افتح الغطاء الموجود على بطاقة الحفظ.
• تجنب لمس ورق الترشيح.
• ألصق البطاقة على سطح مستوي تحت مستوى الخصر.

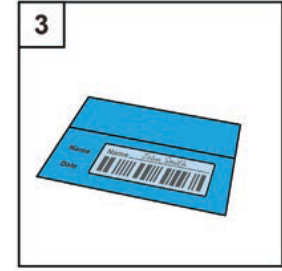


• اكتب اسمك على الملصق (أ) وألصق الملصق المدون عليه "الاسم" و"التاريخ" على بطاقة بقعة الدم (ب).

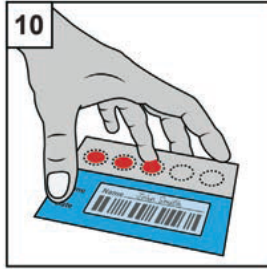


• عندما تتكون قطرة دم، المس بالقطرة مركز الدائرة.
• تابع إلى الدائرة التالية إلى أن تملأ جميع الدوائر الخمسة.

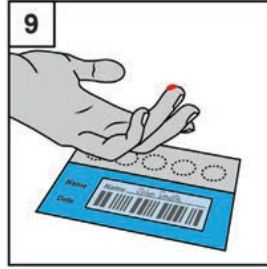


• ضع إصبعك على إحدى دوائر بطاقة بقع الدم واستنزف الدم برفق من الإصبع. لا تضغط بقوة وأبق يديك تحت خصرك.

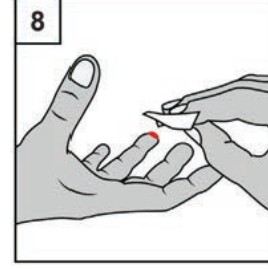


• امسح قطرة الدم الأولى بالشاش (د).

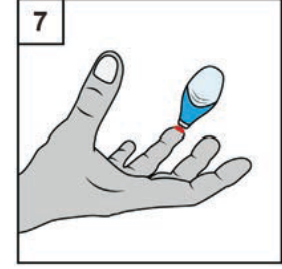


• اضغط الجزء الأبيض الصغير من إبرة الوخز (ج) بقوة على جانب بطن إصبعك إلى أن تسمع صوت طقطقة.

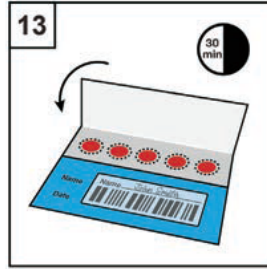


• اترك بطاقة بقعة الدم مفتوحة لمدة 30 دقيقة، لتجف.
• وبمجرد أن تجف، أغلق قلابة البطاقة.

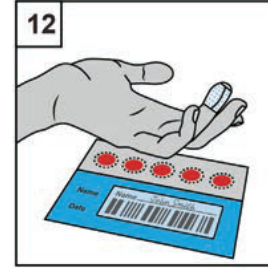


• ضع الضمادة اللاصقة (هـ) على إصبعك.

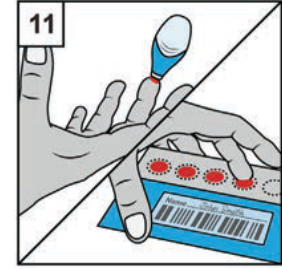


• إذا لزم الأمر، كرر الخطوات من 5 إلى 10 باستخدام إبرة الوخز الإضافية وإصبع مختلف. إذا لم تتمكن من ملء جميع الدوائر الخمسة، أعد البطاقة كما هي.

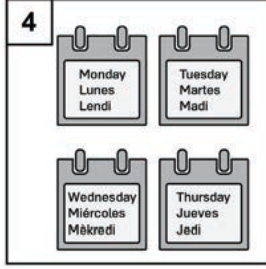


• أرسل عينتك خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، وفي اليوم نفسه الذي أجريت فيه الاختبار.

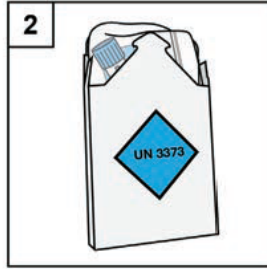

• ضع الصندوق في الطرف البريدي الخاص بشركة UPS وأغلقه.

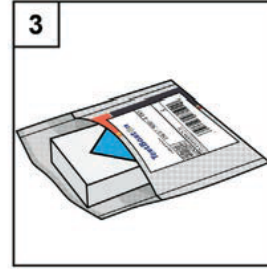

• ضع الكيس البلاستيكي في الصندوق الكرتوني وأغلقه.

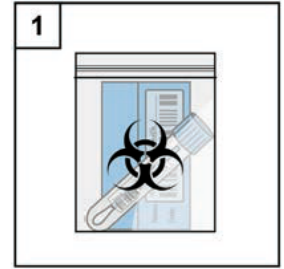

• ضع بطاقة بقعة الدم المكتملة والأنبوب في الكيس البلاستيكي وأحكم إغلاقه.

العربية

أرسل عيناتك بواسطة UPS، باستخدام ملصق الشحن المدفوع مقدّمًا، والمقدم لك.

الخيار 1:

التسليم في مواقع UPS التالية قبل وقت النقل النهائي:

- UPS Stores
 - مركز عملاء UPS
 - صناديق تسليم UPS
 - أي من سائقي UPS
- قم بزيارة www.TestBoston.org/UPS لتبين أقرب موقع والتعرف على ساعات العمل.

الخيار 2:

قد تكون مؤهلاً لالتقاط UPS الطرد من المنزل إذا كان بإمكانك ترك العبوة بشكل آمن في مكان يمكن لسانقي UPS الوصول إليه. حدد مواعيد الاستلام عن طريق الاتصال بالرقم 1-844-487-7522 (1-844-487-7522) UPS-LAB. إذا واجهت أي صعوبة في إعادة مجموعة الأدوات الخاصة بك عبر UPS، يُرجى الاتصال بفريق الدراسة على الرقم 617-525-4220.