

TestBoston

617-525-4220


www.TestBoston.org

ZH


重要事项：您的样本必须在星期一、星期二、星期三或星期四寄回，并且必须在进行测试的同一天寄回。在确认 UPS 投递箱的最终取件时间或安排上门取件服务之前，请不要收集样本。

重要事项：


您的样本必须在星期一、星期二、星期三或星期四寄回，并且必须在进行测试的同一天寄回。在确认 UPS 投递箱的最终取件时间或安排上门取件服务之前，请不要收集样本。

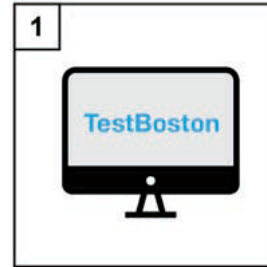


• 登录 TestBoston.org 并完成您的症状调查。

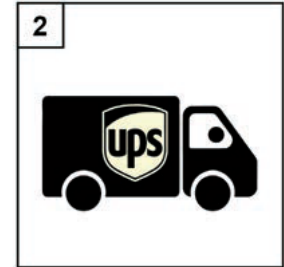

• 与 UPS 确认您的运输方式。

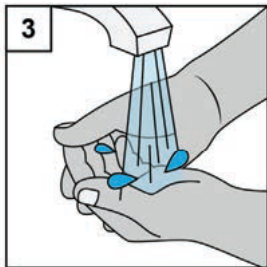


• 洗净并擦干双手。

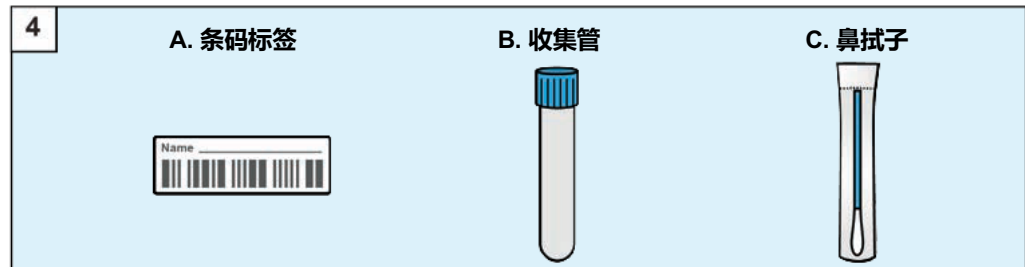


• 打开试剂盒包装，将所有物品放在干净、干燥的表面上。




• 在标签 (A) 上写下您的姓名和收集样品的日期，然后将标签粘贴在收集管 (B) 的侧面。

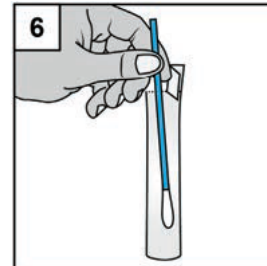


• 从包装中取出拭子 (C)。
• 切勿触摸拭子尖端。

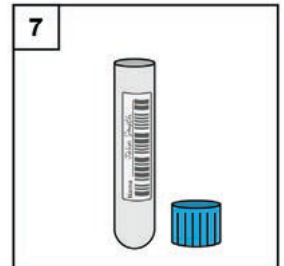


• 拔掉收集管 (B) 的顶盖。

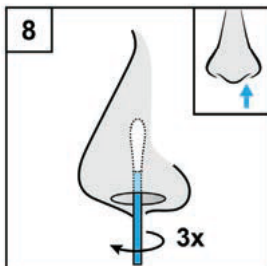


• 将拭子在鼻孔内侧绕圈旋转至少 3 次并保持 15 秒。

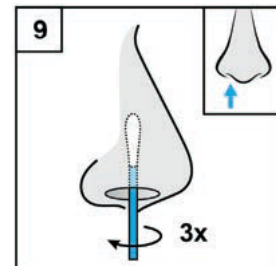

• 将拭子转移到另一个鼻孔，然后重复第 8 步。

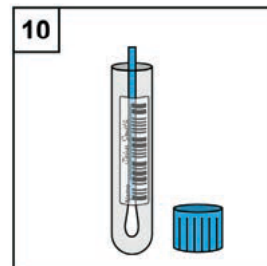



• 将拭子放入收集管中，将拭子柔软尖端置于收集管的底部。

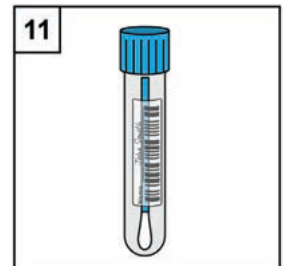


• 盖上收集管的顶盖。
• 洗净并擦干双手。

血斑采样试剂盒使用说明




- 您将需要生成 5 个血斑，这些血斑必须满足以下条件：
 - 血斑需浸透滤纸的整个斑点区域。
 - 血斑需符合示例尺寸（0.5 英寸或 12.7 毫米）。

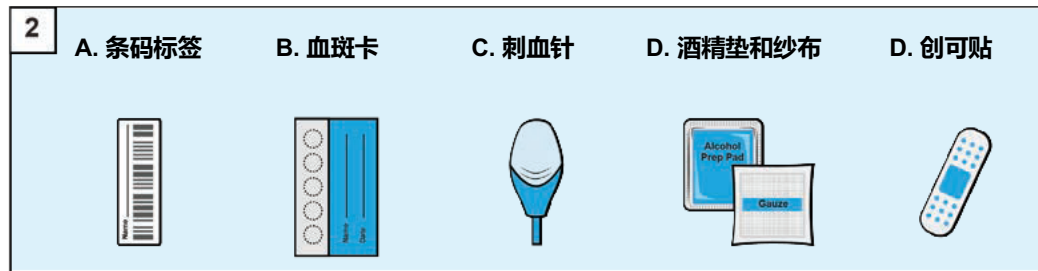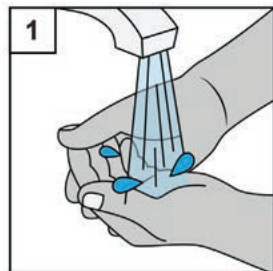

- 洗净并擦干双手。

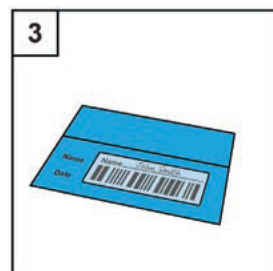

- 打开试剂盒包装，将所有物品放在干净、干燥的表面上。


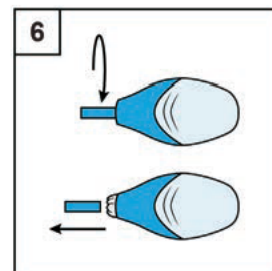
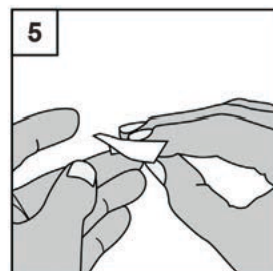
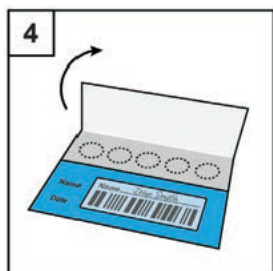


- 将您的姓名写在标签 (A) 上，并将标签粘贴在血迹卡 (B) 上，将其覆盖标有“姓名 _____”(Name) 和“日期 _____”(Date) 的位置。

- 打开收集卡的封面。避免触摸滤纸。
- 将卡片粘贴在低于腰部的平面上。

- 打开酒精垫和无菌纱布 (D)。选择不写字的手的中指或无名指。
- 用酒精垫擦拭手指，使其干燥。

- 拧下保护盖 (C)，然后将其笔直拉出。

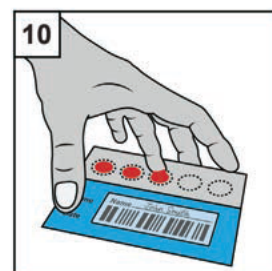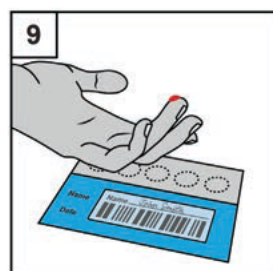
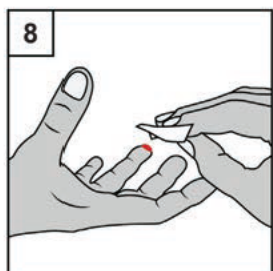
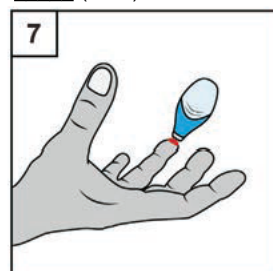


- 用力将刺血针的白色部分 (C) 牢牢地压在手指垫的一侧，直到刺血针发出咔嚓声。

- 用纱布 (D) 擦去第一滴血。

- 把您的手指放在血迹卡片上的一个圆圈上，轻轻地从手指上挤出血液。不要用力挤压，并将手放在腰部以下。


- 形成血滴后，将血滴接触圆圈的中心。
- 继续进行下一个圆圈的操作，直到手指血填满所有 5 个圆圈为止。

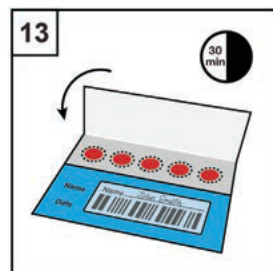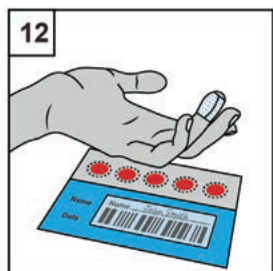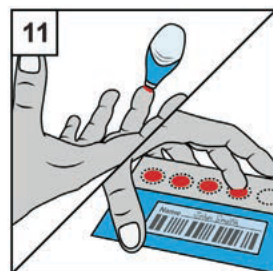

- 如果需要，用另一根刺血针在另一根手指上重复第 5-10 步。如果您无法填满所有 5 个圆圈，请按原样寄回卡片。

- 将创可贴 (E) 贴在手指取血部位。


- 敞开血迹卡片，让其干燥 30 分钟。
- 干燥后，关闭卡片上的翻盖。

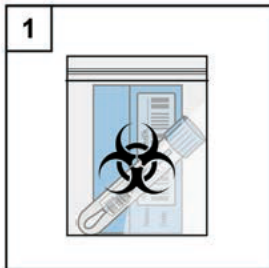


- 将完整的血斑卡片和试
管放入塑料袋中并密封。



- 将塑料袋放入纸板盒中，
然后封闭盒子。

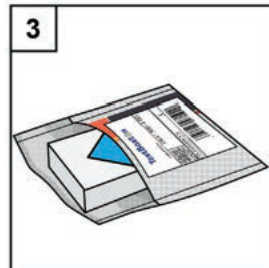

- 将盒子放入 UPS 邮件中
并密封。

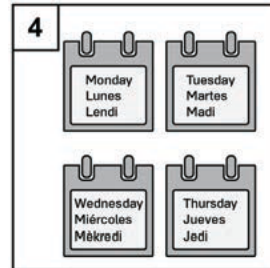

- 在周一至周四寄出您的样
品，并确保在您参加检测的同
一天寄出。

ZH

使用提供的 UPS 预付运输标签将样品寄出。

选项 1：

在最终取货时间之前将样本包裹送至以下 UPS 地点：

- UPS 店铺
- UPS 客服中心
- UPS 投递箱
- 任何 UPS 驾驶员

请访问 www.TestBoston.org/UPS 以找到最近的 UPS 地点和营业时间。

选项 2：

如果您可以将包裹放在 UPS 驾驶员可以访问的安全位置，则可能有资格获取 UPS 上门收件服务。通过致电 1-844-4UPS-LAB (1-844-487-7522) 以安排上门取件服务。如果您在通过 UPS 寄回试剂盒时遇到任何困难，请联系研究团队：617-525-4220。